

## 10. Assistert medisinerings


Assistert dispensering kan man for eksempel bruke når en sengepasient ikke selv klarer å ta medisinen fra dispenseren eller når tjenestemottakerens tilstand har forverret seg. Da fungerer medisindispenseren som et sikkert oppbevaringssted for medisiner hjemme hos tjenestemottakeren. Pleieren får de riktige medisinene på en enkel måte, men tjenestemottakeren får ikke varsellyder eller andre meldinger. Pleieren har muligheten til å gi medisinene fleksibelt i høyst én dag om gangen. Assistert medisinerings kan aktiveres fra medisindispenseren eller fjernpleiesystemet.

Medisindispenseren er lydløs når assistert dispensering er i bruk. Når medisinen er tilgjengelig, er lyset på knappen til medisindispenseren på, men skjermen er i normal modus. Tjenestemottakeren får ikke medisiner fra dispenseren selvstendig; bare en pleier kan gi tjenestemottakeren medisiner fra dispenseren.

### OBS:


Dersom en pleier ikke skal dele ut medisinene til tjenestemottakeren, avvises medisinene etter normal medisineringscyklus.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren. Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.
2. Logg deg inn med enten ID-brikke eller brukernavn og passord.
3. Trykk på medisineringsknappen.
4. Velg om du vil ta ut neste medisinpose eller medisiner for en lengre periode til tjenestemottakeren.

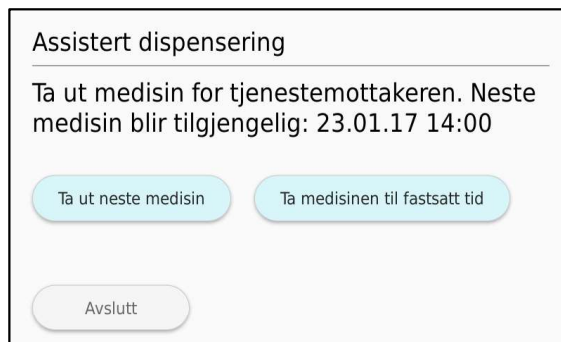

5. Dersom du valgte «**Ta ut medisiner til fastsatt tid**», ber dispenseren deretter om klokkeslettet du vil ta ut medisiner fram til. Fastsett tidspunktet med pluss- og minustastene.

Trykk på «**Start dispenseringen**».

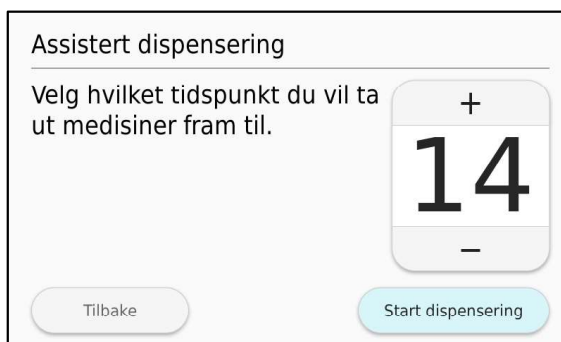

6. Medisindispenseren doserer medisinene for perioden du har valgt.

**OBS:**

Proessen kan vare i noen minutter avhengig av antallet medisinerposer.

Assistert dispensering



Gir ut medisiner, vennligst vent...

7. Medisindispenseren melder ifra om når medisinene er delt ut. Gi dem til tjenestemottakeren.



Medisin er levert, vennligst gi dem til tjenestemottakeren.